




EXPERTS IN
HOREN, SPREKEN
EN VERSTAAN

Veelgestelde vragen over hoortoestellen

Voor ouders en verzorgers van kinderen met hoortoestellen


Hoe zie ik of het een linker- of rechter hoortoestel is?

Een rode of een blauwe markering geeft aan of het een rechter of linker hoortoestel is.

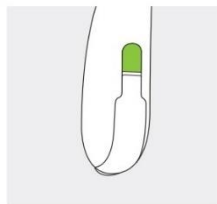

Blauwe markering voor het linker hoortoestel.
Rode markering voor het rechter hoortoestel.

Indien er twee hoortoestellen gedragen worden, wordt er een onderscheid gemaakt tussen het linker- en rechterhoortoestel door middel van een kleurmarkering. Deze zijn vaak te vinden nabij of in de batterijlade. Eventueel kan de audicien ook een kleurmarkering in het oorstukje laten maken.

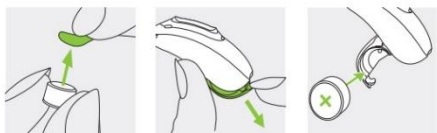

1. Haal de sticker van de nieuwe batterij en wacht twee minuten.
2. Open de batterijlade.
3. Plaats de batterij in de batterijlade met het "+"-symbool naar boven gericht.

Wanneer is de batterij leeg en hoe vervang ik deze?

Een hoortoestel geeft vaak een signaal (auditief of visueel) als de batterij bijna leeg is en vervangen dient te worden. Het is afhankelijk van het type batterij hoelang deze meegaat. Er zijn batterijtesters te koop om de batterij te testen.

Hoe zet ik het hoortoestel aan? En hoe voorkom ik dat mijn kind erbij kan?


Een hoortoestel kan je aan- en uitzetten door de batterijlade te openen of te sluiten. Voor hele kleine kinderen (gemiddeld jonger dan 36 maanden) kan de batterijlade vergrendeld worden om te voorkomen dat de batterijtjes eruit gehaald kunnen worden. Er is dan een speciaal 'haakje' nodig om de batterijlade te openen.




1. Gesloten batterijlade = hoortoestel is aan



2. Open batterijlade = hoortoestel is uit

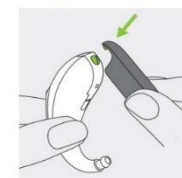

1. Plaats het uiteinde van de tool in het kleine gaatje aan de onderkant van het hoortoestel.

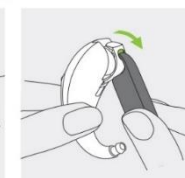

2. Gebruik de tool als hefboom om de batterijlade met kracht in de richting van de groene pijl te openen.

Hier vindt u nog een extra filmpje ter verduidelijking https://www.youtube.com/watch?v=gkHf_63bV74

Wat moet ik allemaal weten over de op maat gemaakte oorstukjes?

Naast het hoortoestel draagt uw kind een op maat gemaakte oorstukje. Hierdoor blijft het goed zitten, maar is ook belangrijk voor goed kunnen horen met het hoortoestel.

De audicien maakt een afdruk van het oor van uw kind, onderstaand filmpje laat dit goed zien.



https://www.youtube.com/watch?v=VmNoh-gOr_4



Uw kind is volop in de groei, dit betekent dat naar verloop van de tijd het oorstukje minder goed zal passen. Dit kan leiden tot geluidsverlies. Bij kleine kinderen komt het voor dat het oorstukje na vier maanden al vervangen moet worden.

U zult merken dat het oorstukje losser zit dan in het begin, maar het hoortoestel kan ook gaan "fluiten". Dit komt doordat er teveel geluid ontsnapt (het oorstukje sluit immers niet meer goed). Het is belangrijk dat u dit goed in de gaten houdt.

Naast de pasvorm van het oorstukje, is het slangetje tussen het oorstukje en het hoortoestel ook belangrijk. Dit slangetje moet regelmatig (d.w.z. elke drie/vier maanden) vervangen worden omdat het hard wordt. Als het slangetje hard wordt, krimpt deze in lengte en diameter. Hierdoor kan uw kind minder goed horen met het hoortoestel.

De slangen kunt u laten vervangen bij uw audicien, maar u kunt dit ook zelf doen.

Het volgende filmpje geeft u een indruk hoe dit moet. Eventuele benodigdheden kunt u krijgen via uw audicien.

<https://www.youtube.com/watch?v=5fG5YibB5kw>

Het oorstukje moet regelmatig schoongemaakt worden. Dit kan u gemakkelijk zelf doen. Uw audicien heeft de producten die u hiervoor nodig heeft, beschikbaar in de winkel.

In het volgende filmpje ziet u hoe dit schoonmaken in zijn werk gaat.

<https://www.youtube.com/watch?v=2aGEIPp7XcA>



Voorbeelden van schoonmaakproducten: een beker, bruistabletten en blaasbalg.

Kan ik voorkomen dat mijn kind het hoortoestel verliest?



Tijdens het spelen van uw kind kan het voorkomen dat het hoortoestel niet goed achter het oor blijft zitten. Naast een goed passend oorstukje, kan een clip aan het hoortoestel bevestigd worden om ervoor te zorgen dat het hoortoestel niet verloren wordt. Deze is verkrijgbaar via de audicien. Voor snoertjes in andere kleuren kun je ook terecht bij: www.oorclipz.nl


Waarvoor zijn de knopjes op het hoortoestel?

Op het hoortoestel van uw kind zitten mogelijk één of meerdere knopjes. Indien er één knopje op zit, is dit meestal een programmaknopje. Het kan ook als volumeregelaar worden ingesteld. Hiermee is het mogelijk te wisselen tussen verschillende programma's op het hoortoestel of het volume te veranderen. Het is afhankelijk van de instellingen welke programma's dit zijn en of het mogelijk is.

Bij meerdere knopjes is er naast een programmaknopje, ook een volumeregelaar aanwezig. Hiermee kan het volume van het hoortoestel naar boven of beneden worden aangepast.

De multifunctie knop heeft verschillende functies.

Hij werkt als volumeregelaar en/of programmakeuzeknop afhankelijk van de hoortoestel instellingen. De instellingen staan vermeld in uw persoonlijke 'hoortoestelinstructies'. Vraag uw audicien om een afdruk van deze informatie.

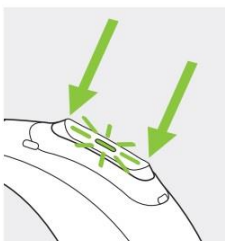

Meestal worden de knopjes bij kinderen uitgeschakeld, zodat er niet per ongeluk iets aan te instellingen veranderd kan worden tijdens het spelen of het indoen.

Hoortoestellen en vocht zijn geen goede combinatie. Gelukkig zijn hoortoestellen steeds beter bestand tegen vocht en levert het steeds minder problemen op. Mocht het hoortoestel toch nat geworden zijn, dan is het het beste om het even uit elkaar te halen en te drogen.

Verwijder het batterijtje uit het hoortoestel en haal het slangetje los van het hoortoestel. Het hoortoestel kan afgedroogd worden met een handdoek of gedroogd worden met droogtabletten of een droogbox (indien u dit heeft). Controleer of er misschien vocht in het slangetje of oorstukje zit en verwijder dit met bijvoorbeeld een blaasbalgje.

Eventueel kunt u met hoortoestel langs uw audicien gaan voor een extra controle van het hoortoestel.

Het hoortoestel is nat geworden, wat nu?

Hoe kan ik controleren of het hoortoestel goed werkt?

Je kunt op verschillende manieren controleren of het hoortoestel (goed) werkt.

De gemakkelijkste manier is het hoortoestel in je hand te leggen en samen met je andere hand een "kommetje" te maken en af te sluiten. Indien het hoortoestel goed werkt, begint het hoortoestel op dit moment geluid te produceren. Dit wordt rondzingen genoemd.

Wil je ook weten hoe het hoortoestel klinkt, kun je ook met een *stethoclip* luisteren naar het hoortoestel. Dit is een soort stethoscoop voor een hoortoestel.

Je bevestigt het oorstukje aan de stethoclip en praat in de microfoon van het hoortoestel. Via de oortjes krijg je het versterkte geluid terug. Indien uw kind een groot gehoorverlies heeft, zijn er ook stethoclips met demper beschikbaar.




Hoe doe ik het hoortoestel goed in bij mijn kind?

Het indoen van het hoortoestel kan aan het begin wat moeilijk zijn, maar naar verloop van tijd zal dit steeds beter gaan.

De audicien of audioloog kan het in- en uitdoen van het hoortoestel met u oefenen.

De volgende plaatjes geven schematisch weer hoe u het hoortoestel het gemakkelijkste kan plaatsen.

1.
Breng het oorstukje naar uw oor en plaats het gehoorgangdeel in uw gehoorgang.

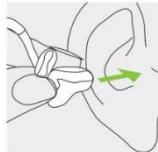

2.
Plaats het hoortoestel achter uw oor.



3.
Plaats ten slotte het bovenste deel van het oorstukje in het bovenste deel van uw oorschelp.



1.
Til het hoortoestel tot boven het bovenste deel van uw oor.



2.
Pak het oorstukje vast en haal het voorzichtig uit uw oor.



NB. Probeer het hoortoestel niet bij de slang vast te pakken

Hier nog een filmpje voor extra uitleg.

<https://www.youtube.com/watch?v=EJWfPruChHU>